

IMAGE SUITE : ENCORE PLUS PERFORMANT.

Le logiciel Image Suite V4 a défini une nouvelle norme de référence en termes d'efficacité d'organisation du travail dans les établissements de soins de faible et moyenne capacité. Ce logiciel robuste comporte une interface tactile dont le maniement n'a jamais été aussi simple. Un ensemble amélioré d'outils, un flux de travail rationalisé et une meilleure qualité d'image ne sont que quelques-uns des avantages apportés par cette solution de dernière génération. En outre, notre module « mini-PACS », qui permet une gestion et une analyse remarquables des images, est désormais disponible en option intégrale. Travaillez sur les images de haute qualité qu'il vous faut, avec un système parfaitement adapté à vos besoins – et à votre budget.



INTUITIF. ADAPTABLE.

IMAGE SUITE VOUS APORTE LES AVANTAGES QU'IL VOUS FAUT.

Abordable

Image Suite a été conçu en tenant compte des impératifs budgétaires des cabinets privés et des établissements de soins de faible à moyenne capacité. En outre, avec le module mini-PACS désormais proposé en option, vous avez le choix d'installer cette fonction quand vous en aurez besoin.

Facilité d'utilisation

Avec notre interface utilisateur de dernière génération, l'utilisation est plus intuitive que jamais. Grâce à la rapidité de prise en main du système, vos manipulateurs sauront acquérir, traiter, modifier et stocker les images comme des spécialistes en un temps record. Vous allez voir votre efficacité et votre productivité s'envoler.

Puissance

Ce système à toute épreuve vous assure un traitement d'image automatique et fiable et vous apporte des outils de mesure et de modification perfectionnés, ainsi que des possibilités d'analyse de rejet d'image. L'enregistrement à distance des demandes d'examen et les fonctions d'accès et de compte-rendu dans le PACS vous permettent d'utiliser le système partout dans votre établissement.


Adaptabilité

Le système est facilement personnalisable en fonction des besoins spécifiques de votre activité. Obtenez les fonctionnalités dont vous avez besoin maintenant et ajoutez-en d'autres au fur et à mesure du développement de votre cabinet.



Détecteurs DRX

UN ENSEMBLE PARFAIT : LOGICIEL REPROGRAPHES LASER CA

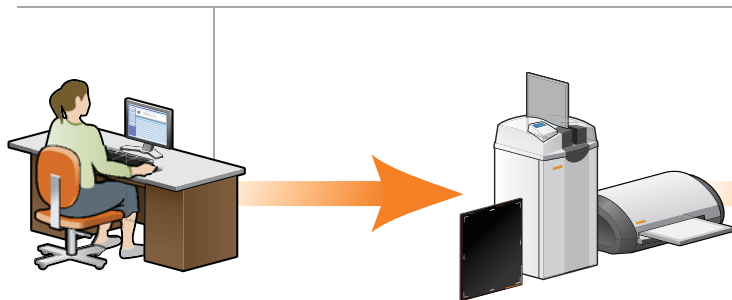

PLANIFICATION

NUMÉRISATION

PLANIFICATION

Accélérez l'enregistrement des patients, où que vous soyez

- Enregistrement des patients à distance grâce à un logiciel Web.
- Sélection rapide et facile des zones anatomiques et des vues par icônes.
- Ajout de zones anatomiques et de vues nouvelles, modification des existantes ou traitement personnalisé.
- Flux de travail simplifié grâce à la connexion avec des systèmes HIS/RIS compatibles Dicom ou HL7.

NUMÉRISATION

Capturez facilement et rapidement des images de haute qualité en combinant Image Suite et un système CR ou DR Carestream

- Acquisition d'images à partir d'un ou deux systèmes DRX-1 filaires ou sans-fil, ou d'un ou deux systèmes CR Vita et Classic.
- Simplicité de la navigation et plus grand confort d'utilisation grâce à l'interface tactile à ergonomie optimisée.
- La certitude d'une qualité d'image uniforme avec les fonctions Enhanced Visualization et Automatic Image Processing (EVP+).
- Des outils et applications cliniques, dont notamment le masquage circulaire, l'analyse d'histogramme, la valeur de pixel dans une ROI,
- Une meilleure qualité d'image et un flux de travail accéléré grâce aux images de référence de positionnement et aux exemples de radiographies.
 - Examens de mammographie avec DIRECTVIEW Classic CR*.
 - Fonction d'analyse et de rejet d'image pour le suivi des examens problématiques.
 - Possibilité d'acquérir automatiquement les informations du DAP, éliminant ainsi la saisie manuelle.

LOGICIEL IMAGE SUITE + SYSTÈMES CR+DR + RESTREAM



LIRE/MODIFIER

Travaillez sur des images de haute qualité

- Grâce à la simplicité et la facilité d'utilisation de l'écran d'acquisition d'Image Suite, vous simplifiez votre méthode de travail et vous améliorez votre productivité.
- Avec le réglage par curseur de la luminosité, du contraste et du niveau de détail dans l'écran d'acquisition, vous affinez le traitement d'image d'un simple clic.
- La possibilité d'ouvrir jusqu'à huit sessions simultanées de visualisation sur le Web vous apporte un gain de productivité supplémentaire.
- Vous disposez d'outils de mesure spécialisés pour la chiropraxie, l'orthopédie et la mammographie.
- Avec les éditeurs de reconstruction automatique ou manuelle, vous pouvez manipuler et coller des images pour créer précisément la vue reconstruite dont vous avez besoin.
- Avec un iPad* et la visionneuse pour tablette, vous avez accès en tout lieu aux images et aux comptes-rendus de vos patients.

DIAGNOSTIC/COMPTE-RENDU

Des diagnostics plus rapides, des patients mieux traités

- Vous améliorez considérablement votre productivité, en visionnant plusieurs images simultanément grâce à la prise en charge de deux moniteurs sur les clients Web.
- Avec le logiciel en option DICOM STORE SCP, vous recevez des images capturées par scanner, IRM, échographie ou CR/DR supplémentaires.
- Vous pouvez créer et consulter des comptes-rendus sur plusieurs clients Web dans tout votre établissement.
- Vous testez la qualité de votre système grâce au logiciel Total Quality Tool d'Image Suite.
- En toute sécurité, grâce au logiciel OmniLink, vous envoyez des images DICOM sur Internet sans avoir besoin de VPN ou de connexion tunnel chiffrée – idéal pour les applications itinérantes.

IMPRESSION/ARCHIVAGE

Partagez et stockez vos images avec efficacité

- Sécurité maximale avec la sauvegarde à la demande ou programmée.
- Sauvegarde sur CD ou sur clé UBS pour stockage hors ligne.
- Utilité optimisée des images avec les outils d'exportation JPEG ou DICOM.
- Prise en charge de compositions d'impression multi-formats avec possibilités de modification indépendantes.



DIRECTVIEW Vita CR



Reprographe laser DRYVIEW 5700


* Non disponible aux États-Unis.

‡ Les outils spécialisés pour la mammographique ne sont pas disponibles aux États-Unis.

LA SOLUTION IMAGE SUITE.

Un système complet
d'acquisition et de
gestion des images
numériques.

CR DIRECTVIEW
Classic

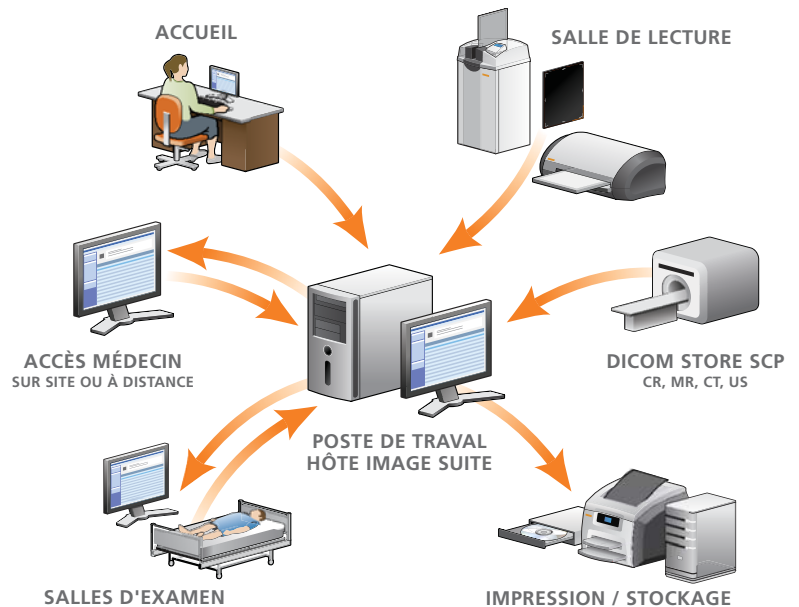

Options du logiciel Image Suite / V4

- Logiciel Clinical Report
- Logiciel d'archivage Mini-PACS
- Jusqu'à 8 licences de visionneuse Web
- Cassettes/potter mural d'imagerie par reconstruction
- DICOM Store Service Class Provider (SCP)
- Fantôme TQT
- Outils de mesure avancés
- Fonction mammographique‡
- Licence d'augmentation du volume de stockage d'acquisition
- Licence d'instances multiples Web Appointment
- Logiciel OmniLink
- Visionneuse pour tablettes*

Un large éventail de services et d'assistance

Bénéficiez de tous les avantages de notre réseau Customer Success. Nous nous efforçons en permanence d'améliorer votre performance en termes d'imagerie et de vous aider à innover pour répondre aux changements, tout en rentabilisant au maximum votre budget et vos ressources. Grâce au réseau Customer Success de Carestream, vous êtes encadré par une équipe dynamique composée d'experts, avec un point d'entrée unique permettant d'établir facilement un contact personnalisé avec les personnes adéquates, quelle que soit la situation. Vous et vos patients bénéficierez des avantages et des bonnes pratiques que seul Carestream peut vous offrir, grâce à l'engagement de nos milliers de clients à travers le monde et à nos 100 ans d'expérience dans l'innovation en matière d'imagerie médicale.



Les produits de cette gamme sont des dispositifs médicaux, consultez les notices des dispositifs pour plus d'information.



www.carestream.fr



© Carestream Health, 2013. CARESTREAM, DIRECTVIEW set DRYVIEW ont des marques protégées de Carestream Health. CAT 200 0102_FR 12/13

* Non disponible aux États-Unis

‡ Les outils spécialisés pour la mammographie ne sont pas disponibles aux États-Unis

Carestream